



Techniek voor bladen met extreme hoek




- 1** Breng het blad op de middenlijn van de mond in, waarbij u de tip voorbij het posterieure deel van de tong voert.

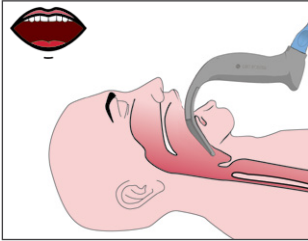


- 2** Identificeer de epiglottis en voer het blad op tot de vallecula voor een beeld van de glottis.

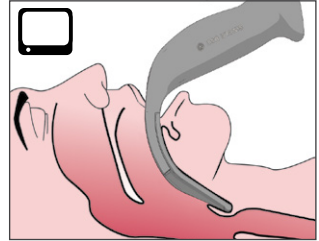


- 3** Gebruik (optioneel) een GlideRite-stilet om de ET-tube langs de rechterzijde van het blad in te brengen.

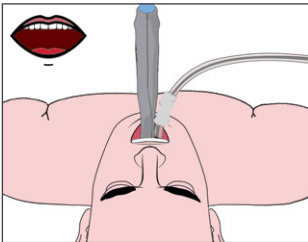

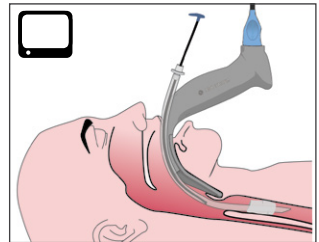

- 4** Voltooi de intubatie.

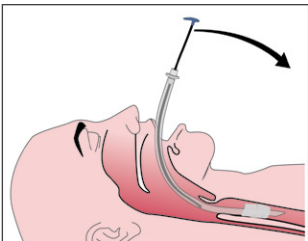

- 5** Verwijder het GlideRite-stilet door het uit te trekken in de richting van de voeten van de patiënt.



-  - Kijk tijdens deze stap in de mond.
-  - Kijk tijdens deze stap op de monitor.


 **Belangrijk:** Dit document dient alleen voor snelle referentie. Zie voor volledige instructies uw bedienings- en onderhoudshandleiding op verathon.com/service-and-support.

 Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Canada
Tel: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039

 Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Nederland
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, VS
Tel: +1 800 331 2313 (uitsluitend VS en Canada)
Tel: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896


 Anandic Medical Systems AG
Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Zwitserland

 MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Zwitserland

Verathon Medical (Australië) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australië
Tel: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970 (binnen Australië)
Tel: +61 2 9431 2000 / Fax: +61 2 9475 1201 (Internationaal)

verathon

GlideRite, Verathon en hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken van Verathon Inc.
Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.
© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-NLNL REV-02